


# Pika MGG -osoitusvärjäyskitti 100 näytteelle

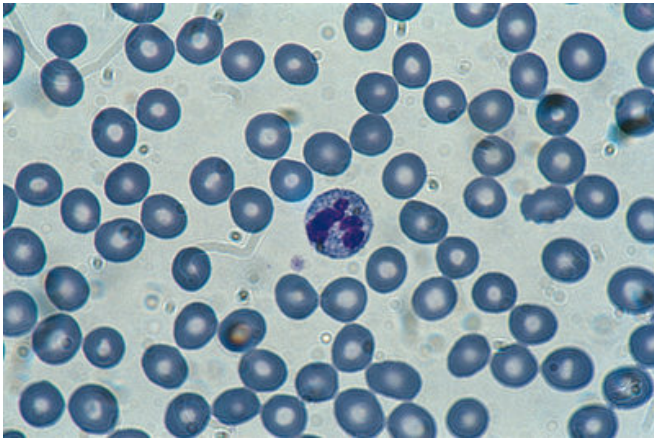

**SISÄLTÖ:** Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite. Se on käyttövalmis tuote, joka on suunniteltu n. 100 solu- tai kudoksenäytelasien valmistamiseksi Pika/Nopea MGG-värjäyksellä valomikroskopointia varten. Tuote sisältää valmiin värjäysohjeen ja seuraavat reagenssit: Fiksatiiviliuos 150 ml, Eosiiniliuos 150 ml ja Tiatsiini-väriliuos 150 ml. Bio-Optican tuotteet valmistetaan ISO 13485:2016 -laatu järjestelmän mukaisesti. **KÄYTTÖ:** Hemato- ja lymfopoeettisten solujen nopea erottaminen ja osoittaminen ilmakeivatuista perifeerisen veren sivelynäytteistä sekä muista sytologista sively- ja aspiraattinäytteistä. Valmistajan antama ohjeellinen värjäysaika on 20 sekuntia. **PERIAATE:** Tuote sisältää samat väriaineet kuin perinteinen May-Grünwald-Giemsa -värjäys. Eosiini-väriaine ja heterogeeniset tiatsiini-väriaineet liukenevat ja sitoutuvat tehokkaasti eri solu- ja kudusrakenteisiin. Värjäyksessä käytettävän veden pH:lla,

puskuriliuksella sekä differentaatioajalla on suuri merkitys värjäyksen lopputulokseen. **TULOS:** Vrt. May-Grünwald-Giemsa -värjäyksen lopputulos. **SÄILYTYS:** Kuivassa, huoneenlämmössä. Tuotteen säilyvyys on 2 vuotta.

Mediqin tuotenumero	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotekoodi	Sailab-koodi	Lisätiedot
1704163		1 kitti	04-090805		Tehdastilaustuote